




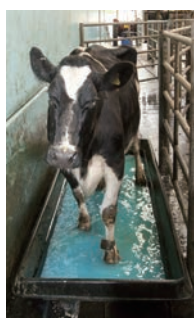


日本初上陸の蹄用バンド！ 蹄の悩みに新発想のソリューション！！

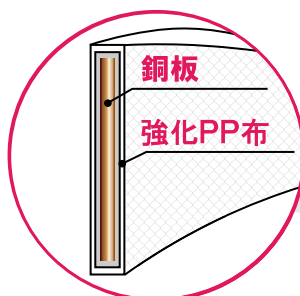

すぐに汚れてしまう
フットバスの悩みに

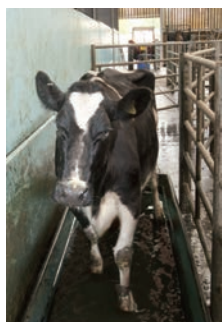

耐久性に優れる強力な
面ファスナーを採用！

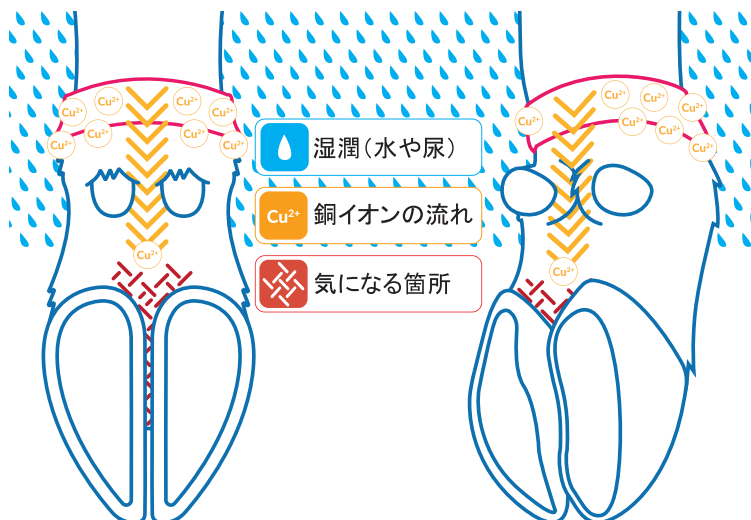

顧客満足度 ★★★★★



「こんなにシンプルな製品が、私たちの
長年の悩みを簡単に解決してくれました。
もうストライド・オン無しでの営農は考えら
れません。」 Mandy & Peter Paterson

取付方法

1. 適切な取付けと作業の安全を確保するため、牛を必ず保定してください。
2. ブラシなどを使用して、蹄の汚れをしっかりと洗い落としてください。
3. 右図のようにストラップ側を上にして、後肢の副蹄の直上部にストライド・オンを巻き付けます。歩行時の関節の屈曲(曲げ伸ばし)を妨げないよう、指1本分程度の隙間(ゆとり)を開けてください。
4. 両手の親指を使って、ストラップの基部から先端に向かってスライドさせ、面ファスナーをしっかりと押さえて固定します。



Q & A

- Q. ストライド・オンがまだ使用できるかはどうすればわかりますか？
- A. 銅芯が時間の経過とともに消費されます。通常は一泌乳期で消費されますが、使用環境によって多少のばらつきがありますので、実際に触って銅芯の有無を確認してください。



製品規格

全長 455mm (ストラップ除く 375mm)
全幅 41mm
厚さ 4mm
質量 27g



ストライド・オンは、清潔で乾燥した場所に保管してください。

輸入元

GEA オリオンファームテクノロジーズ株式会社

www.ows.jp

〒382-8502 長野県須坂市大字幸高 246 番地

TEL.026-248-5360 FAX.026-248-5363